


Instrukcja użycia

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

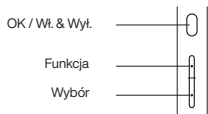

Menu główne Tryby Częstotliwość Timer Potwierdzenie

Start - naciśnij przycisk wł. aby wejść w tryb czuwania. Naciśnij krótko ponownie, a szczoteczka rozpocznie pracę.

Tryb - naciśnij FUNKCJA w trybie czuwania aby wejść w menu wyboru funkcji a następnie wybierz wybraną przez siebie funkcję.

Częstotliwość - naciśnij ponownie FUNKCJA w trakcie wyboru trybu aby wejść do menu wyboru częstotliwości

Timer - naciśnij przycisk funkcyjny ponownie aby przejść do menu wyboru timera szczoteczki.

Potwierdzenie wyborów - po wykonaniu powyższych kroków i przejściu przez wszystkie menu, naciśnij FUNKCJA ponownie aby zapisać wybrane ustawienia i wrócić do trybu czuwania. Naciśnij WŁ. aby rozpocząć pracę urządzenia na nowych ustawieniach.

Zasady bezpieczeństwa

Nawet zdrowe zęby, przy pierwszym użyciu tej szczoteczki mogą delikatnie krwawić lub boleć, ponieważ dziąsła są wrażliwe przy pierwszym użyciu. Objawy te, mogą ustąpić w ciągu 1-2 tygodni. Jeśli nie ustąpią w tym czasie, oznacza to, że stan dziąseł jest nieprawidłowy, przestań używać tej szczoteczki i skonsultuj się z dentystą.

Ostrzeżenie

Użytkownicy którzy przeszli zabiegi ortodontyczne, zabiegi dentystyczne lub naprawę implantów dentystycznych itp. przed użyciem powinni zostać nakierowani przez dentystę. Produkt ten spełnia wszelkie standardy urządzeń elektromagnetycznych. Osoby z rozrusznikami serca lub implantami również powinny skonsultować się z dentystą lub producentem implantów przed użyciem tego produktu. Urządzenie służy wyłącznie do czyszczenia jamy ustnej, nie używaj go w innym celu. Jeśli podczas używania czujesz ból lub dyskomfort wyłącz urządzenie i skontaktuj z lekarzem. Urządzenie posiada wbudowaną baterię. Chroń je przed ogniem i nie zostawiaj w miejscach o wysokiej temperaturze. Urządzenie nie powinno również być używane po upadku, które mogło uszkodzić urządzenie. Nie modyfikuj ani nie rozbieraj urządzenia na własną rękę.

Uwagi

Przed użyciem sprawdź czy urządzenie nie jest uszkodzone. Przed podłączeniem do zasilania sprawdź czy lokalne zasilanie odpowiada temu oznaczonemu na produkcie.

Nie używaj jeśli stacja ładująca lub przewód zostały uszkodzone. Przed ładowaniem upewnij się, że kabel oraz urządzenie są kompletnie suche. Nie używaj produktu podczas kąpieli.

Końcówki szczoteczki są osobiste, nie używaj ich z innymi osobami. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, niemowląt i osób niepełnosprawnych, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną.

medivon.




Pearl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zdrowe i bezpieczne szczotkowanie zębów

Powoli poruszaj szczoteczką pod kątem 45 stopni pomiędzy włosiem szczoteczki a dziąsłami. Podczas szczotkowania nastąpi krótka przerwa co 30 sekund aby przypomnieć Ci aby zmienić pozycję szczoteczki. Jeśli szczoteczka nie zostanie wyłączona ręcznie - sama wyłączy się po upływie czasu timera.

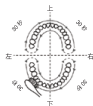

Wymiana końcówek szczoteczki

Nie łatwo jest ocenić stan zużycia szczoteczki po główce. Jej włosie jest bardzo wytrzymałe więc długo zachowa swój kształt. Jednak wilgotne warunki w jakich jest zazwyczaj przetrzymywana sprzyja rozwojowi bakterii. W trosce o zdrowie twojej jamy ustnej zalecane jest wymienianie końcówek przynajmniej raz w miesiącu.

Czyszczenie końcówek

Po umyciu zębów wypłucz główkę szczoteczki pod bieżącą wodą. Brud łatwo zbiera się pomiędzy główką a rączką szczoteczki, dlatego zalecane jest systematyczne czyszczenie tego obszaru. Nie zalecane jest czyszczenie szczoteczki temperaturą powyżej 65 stopni ponieważ może to uszkodzić urządzenie.



Regularne ładowanie

Jeśli poziom baterii spadnie do minimum, zostanie wyświetlona ikona rozładowania. W celu naładowania urządzenia, otwórz pokrywę zabezpieczającą na dole urządzenia i podłącz do ładowarki. Pełne ładowanie urządzenia trwa około 3 godzin.



Podstawowe informacje techniczne

Pojemność baterii: 1200mA
Stopień wodoodporności: IPX7
Czas ładowania: około 3 godzin
Moc urządzenia: 0.5-3W
Zasilanie wejściowe: 5V



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.



MEDIVON sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z Europejską dyrektywą RE 2014/35/EU. Pełny tekst Deklaracji Zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.medivon.pl/deklaracje